

## Sturzmelder mit Autoalert

Der Handsender mit Sturzsensoren löst bei einem Sturz, automatisch einen Alarm aus. In bestimmten Fällen kann der AutoAlert- Funksender einen Sturz nicht erkennen. Bei einem langsamen Rutschen aus einer sitzenden Position – wie aus einem Rollstuhl – wird der Sturz möglicherweise nicht registriert. Wenn Sie fallen und Hilfe benötigen, drücken Sie immer die AutoAlert- Taste auf dem Funksender, sofern Sie dazu in der Lage sind. Beim automatischen Auslösen ertönt 16 Sekunden lang ein Intervall-Piepsen an der Feststation. Während diesen 16 Sekunden kann der Alarm durch Drücken der grünen Taste an der Feststation, oder durch Drücken des Alarm Knopfes am Sturzmelder unterbrochen werden. Den Alarmknopf des Sturzmelders 8 Sekunden gedrückt halten, dann wird der Notruf unterbrochen.

Bei manuellem Auslösen per Knopfdruck auf den Sturzmelder, kann der Notruf nicht unterbrochen werden.

### Beschreibung:

1. Aktive Taste, um einen Notruf manuell auszulösen. Wird ein Alarm von selbst ausgelöst, kann dieser durch 8 Sekunden langes Drücken wieder gestoppt werden.

2. Rote LED

LED aus: Standby-Modus

Rote LED ein: Notruf ausgelöst.

3. Halskordel. Es ist nur die beigelegte Kordel zu verwenden.


Vorsicht: Machen Sie keinen Knoten in Ihre Halskordel. Dadurch kann die ordnungsgemäße Funktion der Sollbruchstelle verhindert werden.

4. Batterieinformationen zum AutoAlert-Funksender

Der AutoAlert-Funksender verfügt über eine nicht wiederaufladbare, nicht austauschbare Batterie. Der AutoAlert-Funksender informiert Vitatel darüber, dass der Akku fast leer ist, wenn noch ungefähr 30 Tage Akkuleistung verbleiben. Vitatel ersetzt den Funksender.

### Nutzungs-Empfehlung

Sturzmelder am besten außerhalb der Kleidung tragen und nicht mit Kleidung abdecken.

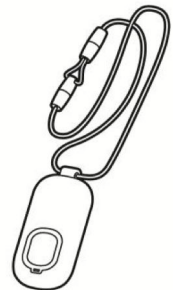

## Anleitung zum Anmelden eines Sturzmelders

Wenn Sie den Sturzmelder nachträglich erhalten haben oder dieser versehentlich nicht an der Basisstation angemeldet wurde, muss dieser, an der Basisstation angemeldet werden.

Dies ist in wenigen Schritten möglich. Schaffen sie es nicht alleine, wird Ihnen Ihre Spitexbetreuung oder eine Bezugsperson, behilflich sein. Gerne können Sie uns anrufen und wir betreuen sie während der Anmeldung. Unten sehen Sie in der Bildanleitung, die einzelnen Schritte.



1. Drücken Sie die grüne Stopptaste und halten den Druck für ca. 5 Sekunden aufrecht. Während dieser Zeit ertönen 2 Signaltöne. Nach ca 5 Sec ertönen 2 kurze hintereinander folgende Signaltöne. Lassen Sie jetzt die Taste los. Das Gerät piept ein weiteres Mal und die rote LED beginnt zu blinken.



2. Drücken Sie jetzt die ROTE Alarm Taste an der Basisstation gemeinsam mit dem Alarmknopf des Sturzmelders, solange bis zwei kurze „Piep“ Töne den Erfolg der Kopplung zwischen dem Sturzmelder und der Basisstation signalisieren.



3. Drücken Sie die rote Notruftaste und die grüne Stopptaste gleichzeitig um den Vorgang abzuschließen.

4. Machen Sie nun einen Probealarm, indem sie die graue Notruftaste ihres Sturzmelders drücken. Wenn sich die Notrufzentrale meldet, sagen Sie, es ist ein Testanruf.